

## Návod k použití přístroje



### Nejprve si pořádně přečtěte návod.

Při používání masážního límce, je nezbytné dodržet všechny pokyny a bezpečnostní opatření, včetně následujících:

#### **NEBEZPEČÍ :**

Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem, popálení, požáru apod.:

Vždy po použití nebo při čištění odpojte přístroj od elektrické sítě a dříve, než jej budete čistit.

Sami nikdy neprovádějte demontáž a opravy výrobku.

#### **VAROVÁNÍ:**

Tento výrobek slouží pro potřebu osobních masáží. Nejedná se o lékařský nástroj a nelze je používat pro komerční činnosti.

Přístroj nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Nepoužívaný přístroj vypněte ze zásuvky.

Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem a umožněte samovolné vyzařování tepla. V opačném případě hrozí přehřátí, které může mít za následek vznik požáru, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.

Netahejte za napájecí kabel a nekrúťte s ním, abyste předešli jeho poškození.

Přístroj používejte výhradně s dodávaným síťovým adaptérem v rozvodné síti s napětím uvedeném na štítku přístroje.

Nepoužívejte přístroj na místech, kde se nachází žíravé látky nebo kam je dodáván kyslík.

Nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí (jako jsou koupelny) nebo s vysokou teplotou, jinak hrozí úraz elektrickým proudem a jiná bezpečnostní rizika.

Pokud budou přístroj používat děti nebo osoby s nedostatečnými znalostmi, jak přístroj použít, je nezbytná přítomnost dohledu.

Těhotné ženy a ženy v období menstruace by se měly před použitím přístroje nebo jeho příslušenství poradit s lékařem. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu.

Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu.

Přívodní kabel udržujte mimo vytápěné povrchy, mohlo by dojít k vážným popáleninám.

Tento výrobek je vybaven funkcí vyhřívání. Osoby, které nejsou citlivé na teplo, musí být při použití přístroje opatrné.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem nejnáchylnějším k opotřebení. Vadné součástky doporučujeme okamžitě nahradit a přístroj nepoužívat, dokud není opraven.


Nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje normálně, pokud spadl na zem, je-li poškozen nebo spadl do vody.

Jestliže během používání pocítíte nepříjemné vjemy, okamžitě přístroj přestaňte používat.

Přestaňte přístroj používat, pokud nepracuje normálně.

Nepoužívejte přístroj při řízení. Dodržujte v každém případě dopravní předpisy.

**Oblasti masáže:** krk, ramena, bedra, hýždě, boky, stehna a lýtka.

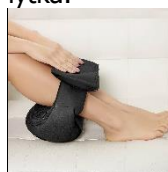

## Obsah balení:

Masážní přístroj, adaptér 220-240V, cigaretový adaptér 12-24V.

## Jak používat:

1. Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky (nebo autoadaptér do konektoru cigaretového zapalovače v autě).
2. Přístroj správně umístěte na tělo.
3. Stiskem tlačítka napájení začnete masáž. Je možné zapínat také funkce vyhřívání a valivé masáže. Přístroj se vypíná automaticky po 20 minutách nepřetržitého používání.
4. Stiskem tlačítka vyhřívání lze nastavit 2 stupně (silné/slabé) vyhřívání nebo vyhřívání vypnout.
5. Stiskem tlačítka směru masáže upravujete směr, jak masáž probíhá.
6. Stiskem tlačítka úpravy rychlosti masáže vybíráte některý ze 3 stupňů rychlosti masáže (nízká/střední/vysoká).
7. Stiskem tlačítka napájení masáž kdykoliv vypnete.

## Popis tlačítek:



- 1 Snížení rychlosti otáčení
- 2 Zvýšení rychlosti otáčení
- 3 Zapnutí nebo vypnutí přístroje
- 4 Změna směru otáčení hlav
- 5 Topení zapnutí nebo vypnutí funkce
- 6 Režim ECO

## Čištění a údržba přístroje:

Nečistěte přístroj žíravými prostředky, jinak může dojít k jeho poškození nebo k vyblednutí barvy.

Před čištěním přístroj vypněte a síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.

Látkový potah se zipem lze sejmout a čistit samostatně.

Výrobek udržujte čistý a uchovávejte jej na bezpečném místě. Přístroj nevystavujte působení prostředí s vysokou vlhkostí nebo teplotou.